




























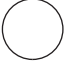


















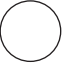







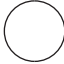

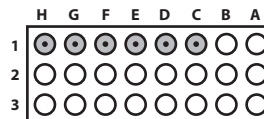
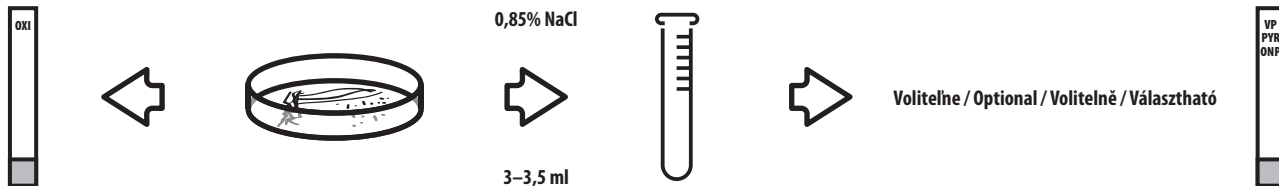


| H'   |          | H  | G  | F  | E  | D  | C   | B  | A  | A'   |
|--|----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|  | <b>1</b> | <b>URE</b>   | <b>GLU</b>   | <b>H2S</b>   | <b>ARG</b>   | <b>ORN</b>   | <b>LYS</b>  | <b>SCI</b>   | <b>bGL</b>   | <b>PHE</b>   |
|  | +        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | -        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>IND</b>   | <b>2</b> | <b>NAG</b>   | <b>SUC</b>   | <b>TRE</b>   | <b>MAN</b>   | <b>LAC</b>   | <b>CEL</b>  | <b>MAL</b>   | <b>GGT</b>   | <b>PHS</b>   |
|   | +        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>GLR</b>   | <b>3</b> | <b>ESL</b>   | <b>DUL</b>   | <b>ADO</b>   | <b>SOR</b>   | <b>RHA</b>   | <b>RAF</b>  | <b>INO</b>   | <b>bGA</b>   | <b>NIT</b>   |
|   | +        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | -        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pracovná schéma / Working pattern / Pracovní postup / Vázlatos munkamenet



Parafinový olej / Paraffin oil / Parafinóví olej / Paraffinolaj

35±2°C, 24 h.



H2 IND reagent

A1 PHE reagent

A2 PHS reagent

A3 NIT reagent

Záznam výsledkov do formulára  
Record the results in the form  
Záznam výsledků do formuláře  
Az eredmények feljegyzése az úrlapra



Záznam výsledkov do počítača  
Record the results in the computer  
Záznam výsledků do počítače  
Az eredmények feljegyzése a számítógépbe

**DIAGNOSTICS s. r. o.**, Hodská 68, 924 01 Galanta, Slovenská Republika

tel.: +421-917-742927, +421-917-742931, +421-31-7886415, fax: +421-2-69202902

IČO: 35 871 181, DIČ: 2021281394, IČ DPH: SK2021281394, www.diagnostics.sk, e-mail: info@diagnostics.sk

číslo účtu: 262 070 1536/1100 (Tatra banka), IBAN: SK84 1100 0000 0026 2070 1536, SWIFT: TATRSKBX

